

Gebruik eventrecorder

Gebruik Kardia®

Cardiologie

Inleiding

Uw behandelend cardioloog heeft de polikliniek Cardiologie opdracht gegeven om u een apparaatje mee te geven voor het beoordelen van uw hartritme. Dit mobiele ECG apparaat (Kardia®), wordt gekoppeld aan uw smartphone.

Wat is een mobiel ECG apparaat?

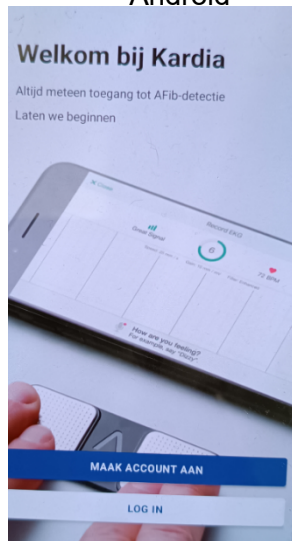
Een mobiel ECG apparaat is een klein kastje dat uw hartactiviteit registreert wanneer u uw vingers erop legt. ECG staat voor electrocardiogram, ook wel een hartfilmpje. De informatie wordt vervolgens via de Kardia app op uw smartphone naar de polikliniek Cardiologie gestuurd.

Instructie in gebruik nemen van de app

Voordat u de Kardia kunt gebruiken dient u eerst de Kardia app via de Google Play Store of Apple app store te installeren.


1. Selecteer de app van **Kardia van AliveCor Inc.** Toestaan dat Kardia je meldingen stuurt? Klik op Niet toestaan. U komt in het startscherm: Welkom bij Kardia.

Android




Klik op Maak account aan.

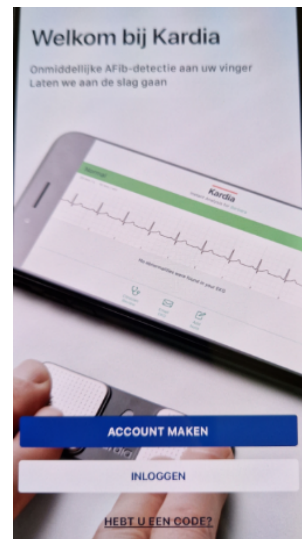IPhone




Klik op Account maken.

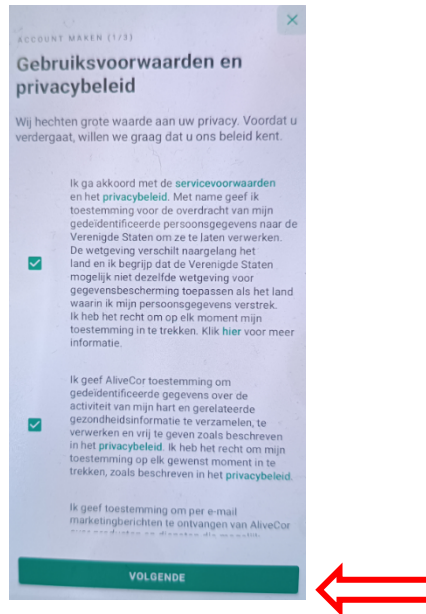2. Vink de eerste 2 gebruiksvoorwaarden en privacybeleid aan. Klik op Volgende.




3. Vul uw emailadres en wachtwoord in. Selecteer Land.

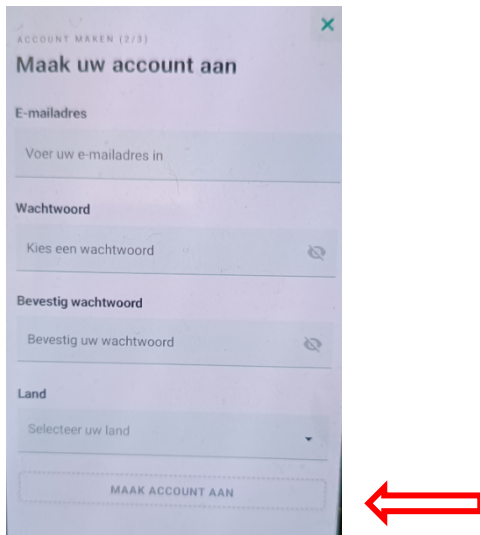Android



Klik op maak account aan

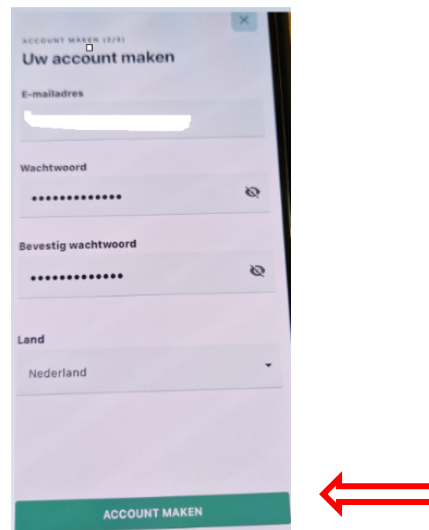Iphone



Klik op Account maken



4. Vul uw profiel in. Klik op Compleet profiel.

ACCOUNT MAKEN (3/3)
Stel uw profiel in

Voornaam
Verplicht

Achternaam
Verplicht

Geboortedatum
Verplicht

Lengte
Verplicht

Geslacht
Verplicht

Ras ⓘ (optioneel)
Ras

COMPLEET PROFIEL

5. Selecteer Basis. Klik op Ga door.

Kies uw ervaring:

Meer gemoedrust <

KardiaCare

Met een KardiaCare lidmaatschap krijgt u:

- Onbeperkt EKG's met ons geavanceerde algoritme
- 4 hartfunctielaborant credits voor een EKG-beoordeling per jaar
- Samenvattende rapporten en inzichten over uw hartgezondheidsgegevens
- €9.99/maand of €99.00/jaar

MEER INFORMATIE OVER KARDIACARE

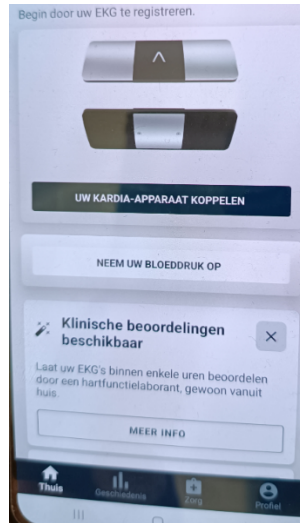
Basis

EKG registreren, bloeddrukgeschiedenis en gewicht en bekijk uw geschiedenis.
Als u van uw arts een 12-cijferige koppelingscode hebt gekregen, kies dan deze optie.

GA DOOR


KARDIACARE AL AANGESCHAFT?

6. Klik op Uw Kardia-apparaat koppelen.



7. Selecteer KardiaMobile.

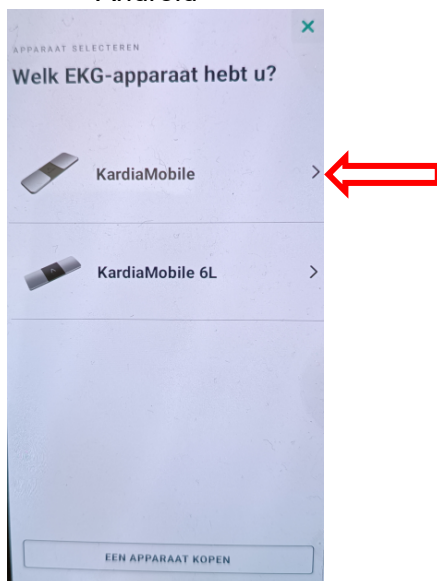Android



IPhone



8. Microfoontoegang toestaan. Klik op Microfoontoegang toestaan.



9. Kardia toestaan om audio op te nemen?

Android



Selecteer Tijdens gebruik van de app.

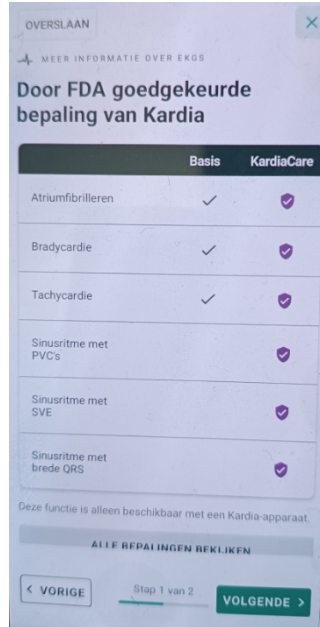
iPhone



Selecteer Sta toe.

10. Scherm door FDA goedgekeurde bepaling van Kardia.

Android



Klik op Volgende.

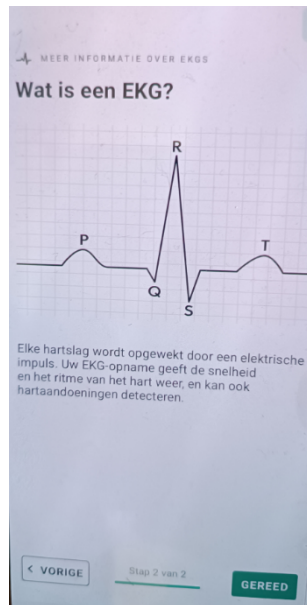
IPhone



Klik op .


11. Daarna komt u in het scherm Wat is een EKG?

Android



Klik op Gereed.

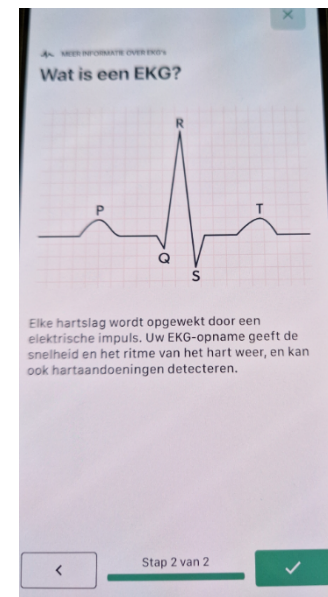IPhone



Klik op .

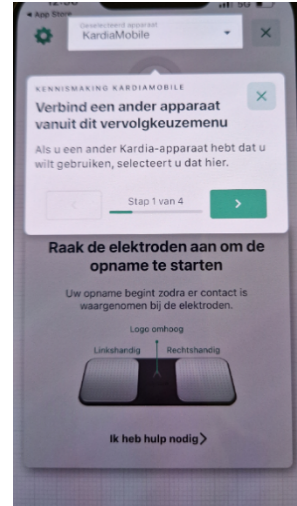
12. Verbind een ander apparaat vanuit dit vervolgkeuzemenu.

Android



Klik op Volgende.

iPhone



Klik op .

13. Plaats uw toestel vlakbij uw telefoon.

Android



Klik op Volgende.

iPhone



Klik op .

14. Plaats vingers van beide handen op de elektroden.

Android



Klik op Volgende.

IPhone



Klik op .

15. Uw EKG-opname gaat beginnen.

Android



Klik op Gereed.

IPhone



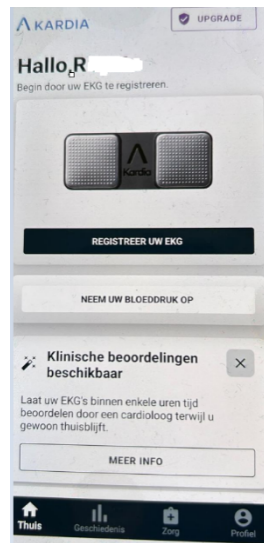
Klik op .

Instructies voor het maken van een opname

De door u ingestuurde opnames worden dagelijks bekeken, met uitzondering van de weekenden en feestdagen.


1. Start de Kardia app. Wees er zeker van dat de bluetooth verbinding van uw telefoon aan staat. U maakt een opname door te klikken op:

Android



Registreer uw EKG.

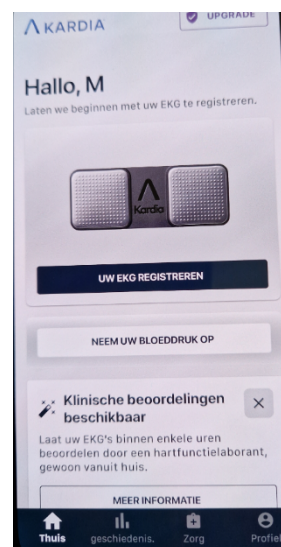IPhone




Uw EKG registreren.

2. U legt één of twee vingers van de linker hand op de linker elektrode en één of twee vingers van de rechter hand op de rechter elektrode. Als beide elektrodes goed contact maken met de huid van uw vingers zal een 30 seconden registratie starten.



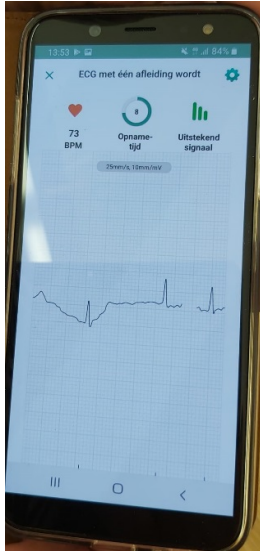3. Voor de beste opname is het belangrijk dat u niet beweegt en er zo weinig mogelijk omgevingsgeluiden zijn. Wanneer u uw vingers op de pads heeft geplaatst, zal de Kardia app 30 seconden registreren.



4. Wanneer de opname is gemaakt verschijnt onderstaande melding. Het is de bedoeling dat u de enige bent die een opname maakt. U klikt dan ook op JA

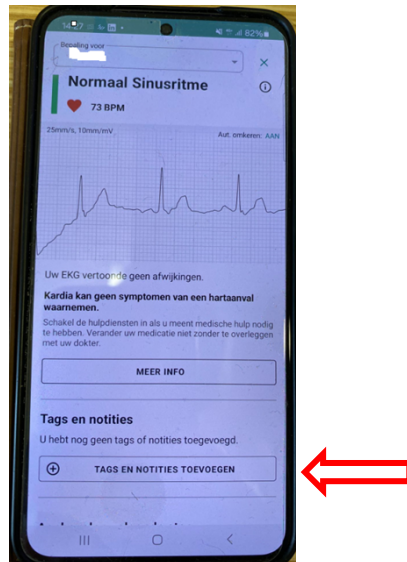
Android

IPhone




De IPhone heeft deze stap niet.


5. Nu kunt u uw klachten in voeren door met uw vinger op het scherm omhoog te swipen (vegen).
Klik op TAGS EN NOTITIES TOEVOEGEN.



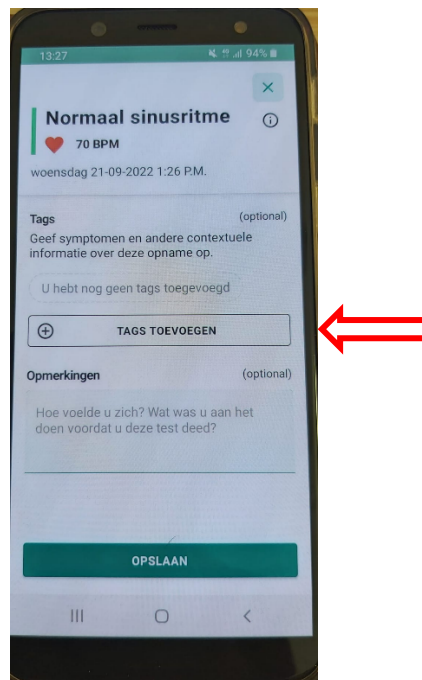
6. Klik op TAGS TOEVOEGEN.



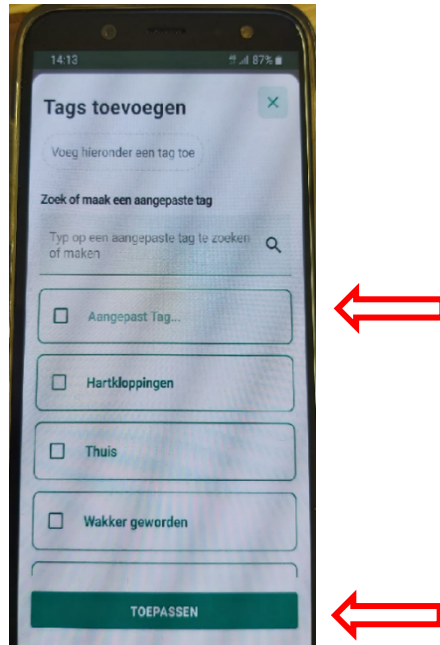7. Selecteer één of meerdere bestaande tags of maak zelf een aangepaste tag. Klik daarna op TOEPASSEN.



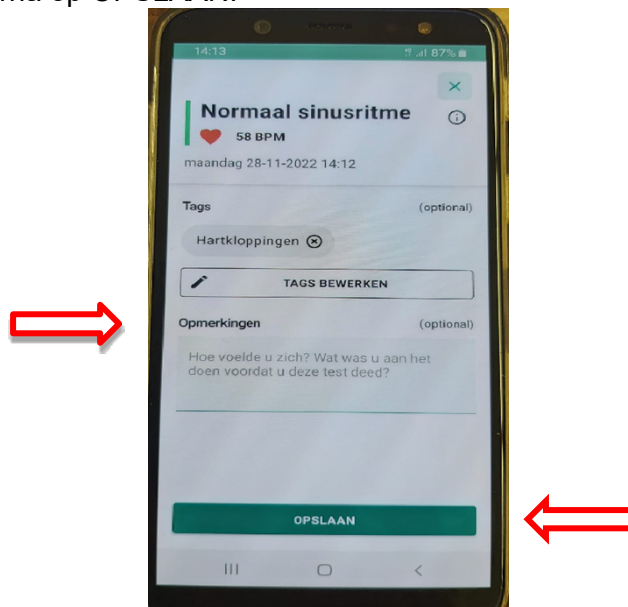8. Type bij Opmerkingen hoe u zich voelde of wat u aan het doen was tijdens het maken van de opname. Klik daarna op OPSLAAN.

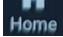



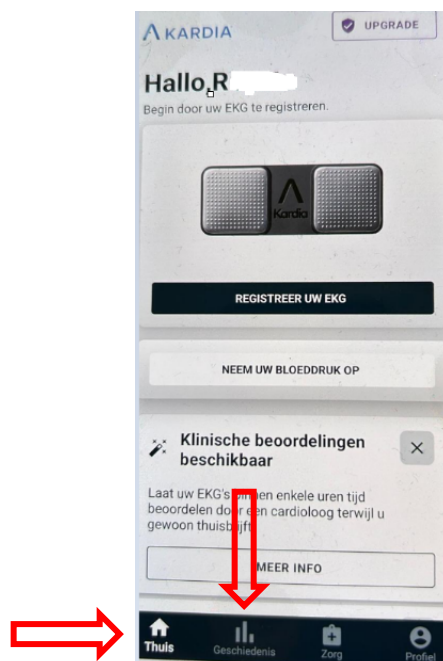
9. Om uw opname te verzenden, moet u het onderstaande scherm weg klikken door op het kruisje



rechts bovenin het scherm te klikken.




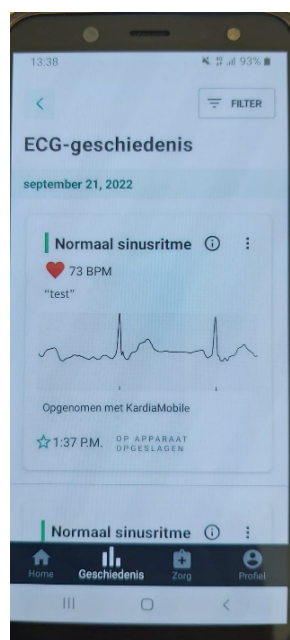
10. U komt weer in het startscherm  (thuis). U klikt vervolgens op geschiedenis 



11. In dit beginscherm swiped (veegt) u met uw vinger naar boven, zodat u bij de gemaakte opname(s) komt. Klik op EKG-GESCHIEDENIS BEKIJKEN

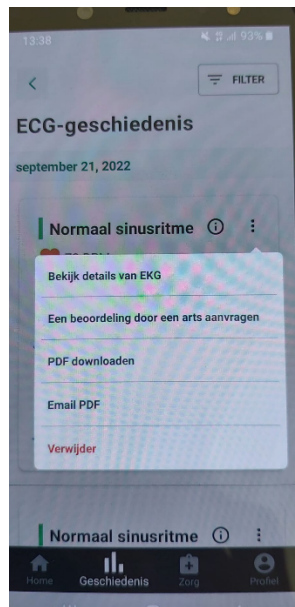


12. Klik rechts bovenin het scherm op de 3 puntjes .




13. U krijgt het onderstaande scherm te zien

Android




Klik op Email PDF.

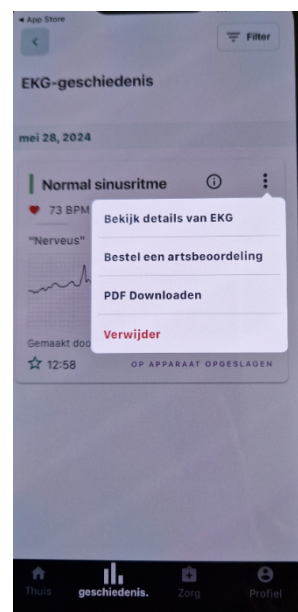IPhone




Klik op PDF Downloaden.

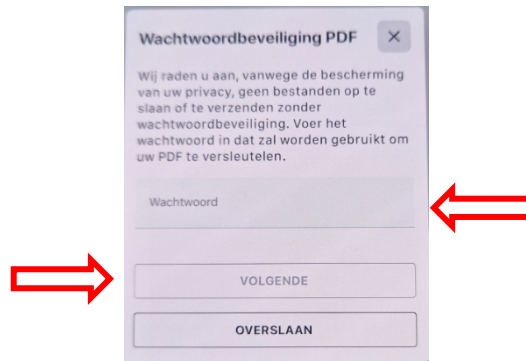
Er verschijnt een melding met Wachtwoordbeveiliging PDF in uw scherm. Type het wachtwoord **2110** in. Let op dat u geen typefout maakt, want dan kunnen wij uw verzonden opname niet openen. Klik op Volgende. Uw opname wordt beveiligd naar ons verzonden. Verzend uw opname / PDF bestand via uw mail naar: **kardia@mst.nl**



Als u een iPhone heeft, heeft u extra stappen voor het verzenden van uw opname:

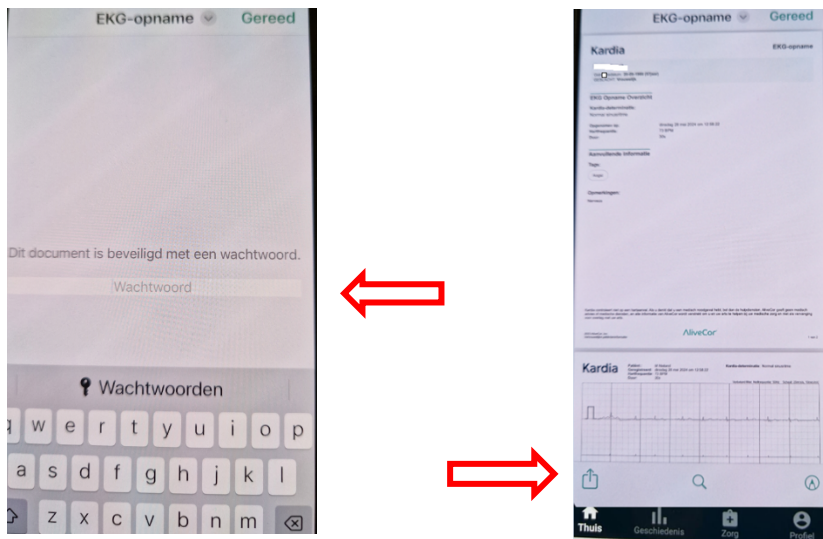Nadat u uw wachtwoord heeft ingevoerd, Komt u in het volgende scherm. Type nogmaals het wachtwoord in.



De desbetreffende opname wordt geopend. Klik op .



Aandachtspunten

Let u bij gebruik van de Kardia op het volgende:

- het apparaat mag niet in de buurt van water of in een natte omgeving worden gebruikt;
- audio- en videoproducten en vergelijkbare apparatuur veroorzaken mogelijk storing. Blijf uit de buurt van zulke apparatuur wanneer u een opname maakt;
- maak geen opnames op een plaats waar de Kardia wordt blootgesteld aan sterke elektromagnetische krachten, zoals in de buurt van een lichtboog, krachtige radiozender, etc.;
- de signaalsterkte kan dalen bij de detectie van signalen van andere ultrasone, akoestische bronnen. Gebruik de Kardia niet in de buurt van andere apparaten die ultrasone, akoestische golven uitzenden zoals espressomachines, bepaalde ventilatiesystemen of een andere Kardia;
- maak geen opname wanneer u rijdt of fysieke activiteiten verricht;
- maak geen opname als de elektroden vuil zijn. Maak ze eerst schoon, dit kunt u doen met een vochtig doekje;

Overige informatie

- Wij bekijken dagelijks uw opnames, met uitzondering van het weekend en feestdagen;
- Neemt u bij ernstige klachten contact op met de polikliniek Cardiologie (telefoon (053) 487 21 10). Bij levensbedreigende klachten belt u 112.

Inleveren

Bij het inleveren krijgen wij het volgende van u retour:

- de Kardia

Inleverdatum:

.....dag/...../20.... voor uur bij

Belangrijke contactgegevens

- polikliniek Cardiologie Enschede, route A25, telefoon (053) 487 21 10;
- polikliniek Cardiologie Oldenzaal, route 132, telefoon (053) 487 21 10.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de specialist of hartfunctielaborant dan om nadere uitleg.